



brina

Ventilador mecânico de ponta que oferece ventilação invasiva e não invasiva para pacientes neonatais, pediátricos e adultos.

High-tech, high trust.

tecme
committed to life

Colocando a ventilação mecânica e a tecnologia de suporte à vida em um nível superior.




Hoje, após anos de pesquisa e investigação, chegou o momento de apresentar Brina: nossa mais avançada família de ventiladores da nova geração.

Características:

Um passo a frente em design

- Touchscreen de alta resolução
- Solução modular
- Tela removível
- Interface inteligente e intuitiva
- Monitoramento abrangente
- Ampla variedade de recursos de software

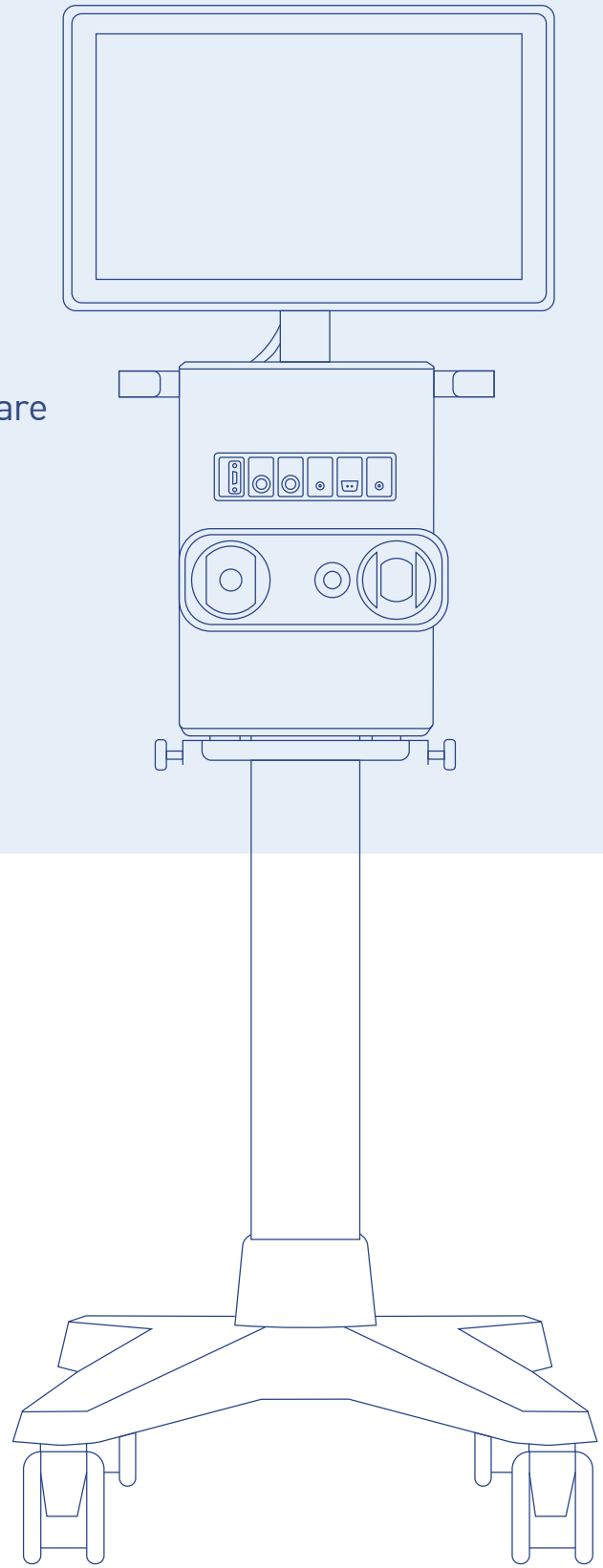

Design

Interface inteligente e intuitiva

O máximo em touchscreen

O touchscreen de 18,5" e alta resolução com interface de usuário intuitiva deixa a operação do ventilador fácil e rápida.



Removível e rotativa

Tela removível e rotativa. Indicador de alarme de alta visibilidade. O design da VentBox dá ao usuário a possibilidade de montá-la em carro móvel, suporte de teto ou estativa.



Design

Design aprimorado para medições mais precisas



A **Porta expiratória** foi desenvolvida especialmente para um controle eletrônico mais preciso e direto das fases do ciclo respiratório. Ela habilita um tempo de resposta aprimorado e a respiração espontânea do paciente mesmo durante a fase inspiratória nos modos de pressão controlada.

O **Sensor paramagnético** foi integrado para desempenho eficiente e contínuo ao longo do ciclo de vida do ventilador, sem a necessidade de substituição periódica.

Experiência do usuário

Interface de usuário simples e clara.
Projetada para tomada de decisões importantes em diferentes situações.

Pulmão Ativo

Pulmão ativo para uma melhor visualização gráfica da condição ventilatória do paciente. A complacência do pulmão e a resistência das vias aéreas são exibidas de maneira gráfica e numérica. Os pulmões, juntamente com o diafragma expandem e contraem de forma sincronizada com as respirações do paciente.



Tela numérica

Visualização projetada para ser usada durante a análise da sala médica, melhorando a visibilidade dos parâmetros à distância.




Visualização para a família

Visualização projetada para gerar um ambiente agradável durante as visitas familiares sem perder o monitoramento dos parâmetros básicos de ventilação.



Design modular

Adaptável a diferentes ambientes e necessidades clínicas:

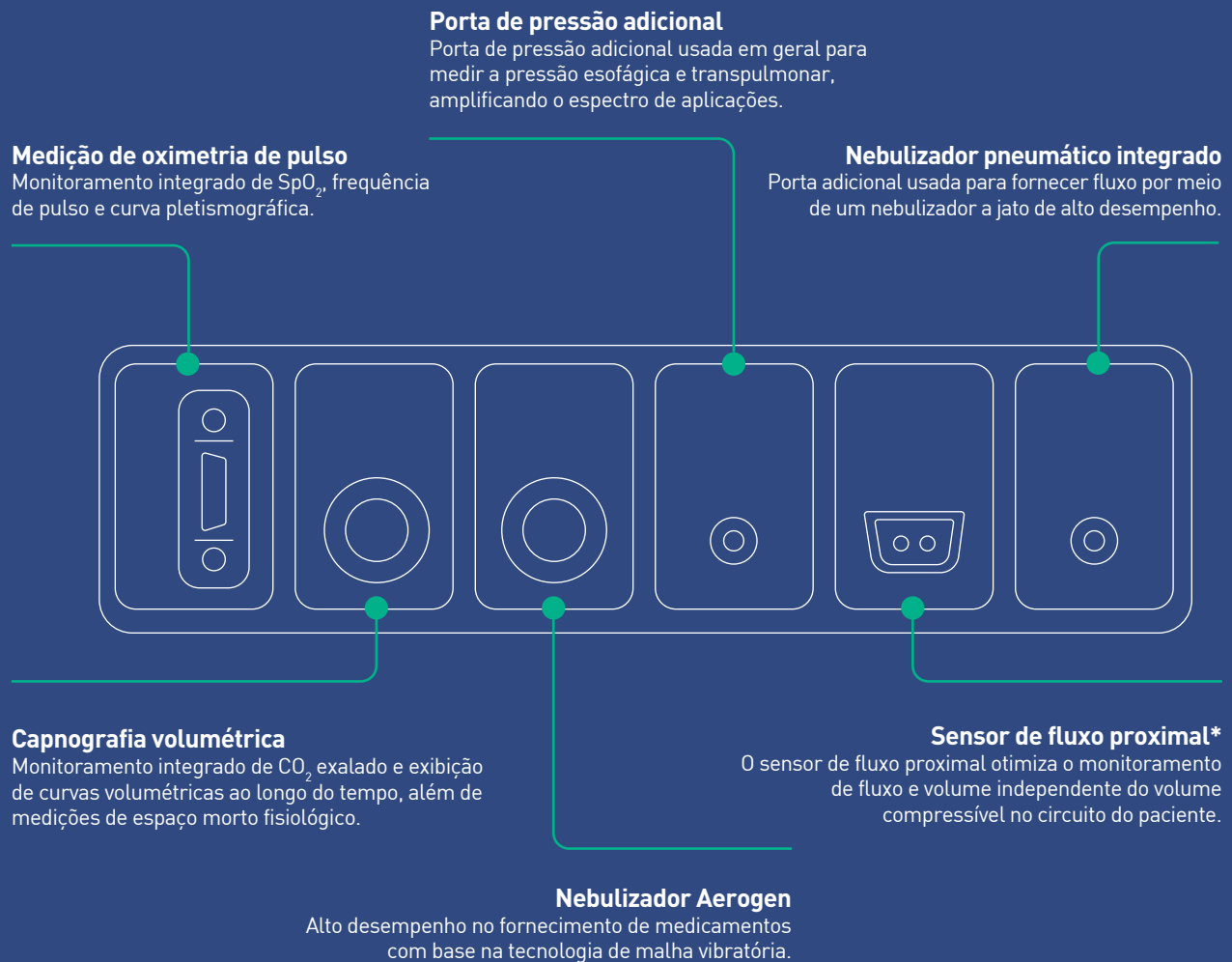

*Disponível apenas na categoria NEO

Software

Ampla variedade de modos e ferramentas de ventilação para necessidades clínicas diferentes e personalizadas.

AVA (Assistência Ventilatória Adaptativa)

Modo adaptativo que controla a ventilação minuto, gerando um padrão respiratório eficiente com mínimo esforço do paciente.

Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo

Fornece oxigênio por cânulas ou máscaras, ampliando o uso do ventilador antes e após a ventilação mecânica, com suporte não invasivo.

Teste de Respiração Espontânea

Permite avaliar a respiração espontânea antes do desmame, com monitoramento e alarmes em tempo real para maior segurança.



Mais de 55 anos de comprometimento com a inovação e os cuidados ao paciente.
www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo

