



Smart Scope
Confianza en cada
procedimiento, desde
la primera mirada

Video Laringoscopio

Intubación perfecta al primer intento

SMARTSCOPE VL PRO

AMPLIA VISUALIZACIÓN

Pantalla táctil antirreflectante de 3,5", visualización de imágenes en campo panorámico.


USB TIPO C

Para una rápida transferencia de datos y carga de batería.

BOTÓN ON/OFF

ROTACIÓN INTELIGENTE

Arriba-abajo → 120°
Izquierda-derecha → 270°

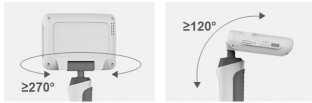

INDICADOR LUMINOSO

ASA ERGONÓMICA

Para una mejor sujeción y ajuste.

CÁMARA DE ALTA RESOLUCIÓN

Excelente visión con antivaho activo calefaccionado.

LUZ FRÍA DE ALTA POTENCIA



Eficiencia y Claridad en la Visualización de la Laringe

Diseñado para ofrecer una visualización confiable, simple y conveniente de la laringe, facilita una visión clara de las vías respiratorias superiores, reduciendo la necesidad de manipulación de tejidos.

La mejora en la visualización de la epiglotis ofrece múltiples beneficios:

- Menor tiempo para la intubación con éxito
- Mayor tasa de éxito en el primer intento de intubación
- Reducción de la fuerza aplicada
- Reducción de las complicaciones relacionadas con la intubación
- Menor exposición de los médicos a patógenos provenientes de las gotitas



Características:



720P HD

Cámara de 2.0 megapíxeles que proporciona fotografías y videos 1280x720.



Video/Cámara

Vídeo y foto con un sólo clic.



Rotación Multiángulo

Ángulo de rotación frontal-trasero 120° e izquierda-derecha 270°.



Pantalla Táctil

Pantalla completamente táctil antirreflectante de 3,5 pulgadas con resolución de 640x480.

Potencia

- Compatible con cargadores inalámbricos y ahorro automático de batería.

Memoria inteligente

- 16Gb de memoria por defecto - Opcional: 32-256GB.

Áreas de Uso:

- Anestesia
- Pediatría
- UCI
- Ambulancias
- Urgencias/Shock Room
- Medicina Respiratoria




Dos equipos, cada uno con su sistema exclusivo de valvas. Una elección según las necesidades clínicas

Valvas Reutilizables

Ideales para instituciones que priorizan la sustentabilidad y cuentan con procesos de esterilización propios, como quirófanos.

Disponibles en distintos tipos y tamaños, las valvas reutilizables permiten una cobertura anatómica completa, desde neonatos hasta adultos, incluyendo pacientes con vía aérea difícil

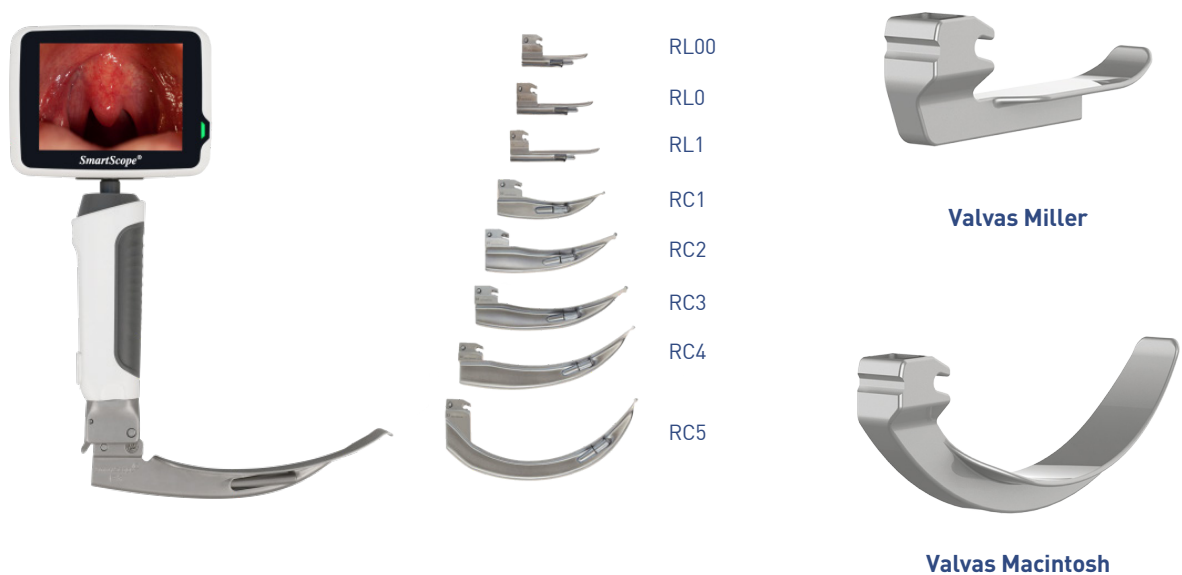

CÓDIGO	TIPO	TAMAÑO	DESCRIPCIÓN
RL00	Miller	Extra pequeño (prematuro)	Valva recta
RL0	Miller	Pequeño (neonato)	Valva recta
RL1	Miller	Estándar (neonato)	Valva recta
RC1	Macintosh	Pediátrico	Valva curva
RC2	Macintosh	Pequeño (adulto)	Valva curva
RC3	Macintosh	Mediano (adulto)	Valva curva
RC4	Macintosh	Grande (adulto)	Valva curva
RC5	Hiperangulada	Extra grande (adultos, anatomías difíciles)	Valva curva hiperangulada

Valvas Descartables

Orientadas a quienes buscan mayor agilidad operativa, menor manipulación y eficiencia en la rotación de pacientes, como en salas de emergencias.



S1 Neonato



S2 Pediátrico



S3 Adulto
S4 Adulto Large

CÓDIGO	TIPO	TAMAÑO (Ø intubación aplicable)	USO RECOMENDADO
S1	Macintosh	Extra pequeño (2.5 – 4.0 mm)	Prematuros y neonatos
S2	Macintosh	Pequeño (4.0 – 6.0 mm)	Pediátricos y niños
S3	Macintosh	Mediano (6.0 – 8.0 mm)	Adultos
S4	Macintosh	Grande (≥ 8.0 mm)	Adultos con anatomía amplia

Especificaciones Técnicas:

El videolaringoscopio Tecme, combina alta tecnología en iluminación, visualización y grabación para mejorar la precisión y eficiencia en procedimientos clínicos.

Tamaño y Peso	- Dimensiones: 130 x 100 x 239 mm (Largo x Ancho x Alto). - Peso (sin valva): 0,26 kg.	
Fuente de Luz	LED fría, iluminación ≥1000 lx, temperatura de color ≥5000 K.	
Pantalla	- Tipo: LCD TFT a color de 3,5". - Ángulo de rotación: Frontal-trasero ≥120°, izquierda-derecha ≥270°. - Control táctil y brillo ajustable en 3 niveles.	
Cámara	- Tipo: CMOS, 1 millón de píxeles. - Resolución espacial: ≥18,00 lp/mm. - Ángulo de visión: ≥60°. - Diseño anti-vaho con control de sobrecalentamiento (38-41°C).	
Memoria	16gB incluidos - Extensible hasta 256 GB.	
Batería	- Tipo: Ion de litio. - Duración de trabajo: 300 minutos. - Ciclo de recarga: 300 veces. - Ahorro automático de batería: Apagado automático a los 5 minutos para preservar la salud de la batería. - Alarma de batería baja.	
Distancia de Trabajo	20-100 mm.	
Funciones Especiales	Fotografías, Grabación de video, Navegación, Reproducción, Configuración de tiempo, Registros médicos.	
Puerto	USB tipo-C y carga inalámbrica.	
Interfaz / Salida	Puerto de video opcional para pantalla de 10" o proyector con HDMI.	
Fuente de alimentación	AC100-240V, 50/60Hz, potencia de 50 VA.	



Más de 55 años de experiencia comprometidos con la innovación y el cuidado del paciente.

www.tecmeglobal.com / info@tecmeglobal.com

Córdoba - Buenos Aires - Atlanta - São Paulo